


**Время  
для себя!**

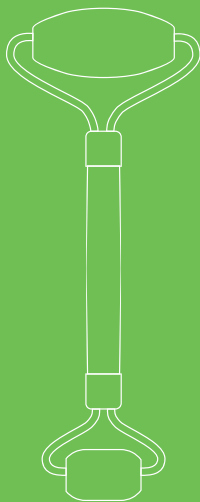

**Кварцевый  
роликовый массажер  
КТ-2944**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**info@kitfort.ru**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация .....	4
Устройство массажера .....	5
Подготовка к работе и использование.....	5
Чистка и обслуживание .....	8
Уход и хранение.....	8
Устранение неполадок .....	9
Технические характеристики .....	9
Меры предосторожности.....	10

## Общие сведения

Кварцевый роликовый массажер КТ-2944 поможет подтянуть кожу, замедлить появление морщин, избавиться от отеков. Он улучшает циркуляцию крови и лимфы, а также ускоряет обмен веществ в верхних слоях кожи, благодаря чему выравнивается цвет кожи. Массажер улучшает тонус мышц лица, делает его форму более выразительной, сокращает морщины и предотвращает появление новых. Также он помогает избавиться от отечности по утрам и расслабить мышцы лица и шеи в конце дня.

Роликовый массажер оснащен двумя роликами: большим и малым. С помощью большого ролика можно проработать крупные области лица (лоб, щеки, линию челюсти) и шею. Малый ролик применяется для массажа мелких областей, таких, как зоны вокруг глаз, около крыльев носа и вокруг рта. Массажер имеет компактный и легкий размер, так что его удобно брать с собой в поездку или на работу и делать массаж в любом месте.

Массажер КТ-2944 выполнен из розового кварца. Этот камень известен своими целебными свойствами с древних времен. Считается, что розовый кварц способен улучшить работу сердечно-сосудистой, лимфатической и нервной систем, справиться с бессонницей.


Роликовый массажер не является электронным устройством, поэтому его можно использовать с маслами, сыворотками и кремами. Массажер не является медицинским прибором и должен использоваться только в профилактических и косметологических целях.

## Комплектация

1. Кварцевый роликовый массажер — 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
3. Коллекционный магнит — 1 шт.\*

\* опционально

## Устройство массажера

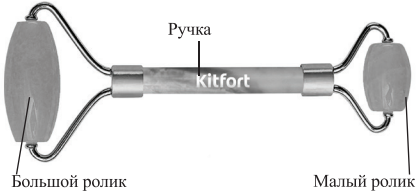

Массажер имеет два ролика. Большой ролик подходит для проработки щек, линии челюсти, лба и шеи. Малый ролик применяется для массажа мелких областей, таких, как зоны вокруг глаз, около крыльев носа и области вокруг рта.

## Подготовка к работе и использование

### Подготовка к работе

Перед первым использованием достаньте массажер из коробки и удалите весь упаковочный материал. Проздезинфицируйте массажер. Для дезинфицирования массажера можно использовать ватный диск, смоченный хлоргексидином или спиртом.

**Внимание!** При наличии онкологических заболеваний, заболеваний эндокринной и сердечно-сосудистой систем, заболеваний кожи, воспалении лимфоузлов, ЛОР-заболеваниях, а также при беременности и кормлении грудью перед использованием массажера проконсультируйтесь с врачом.


### Использование

1. При выполнении массажа на ролики массажера могут наматываться волосы, поэтому уберите волосы

- от лица и шеи перед процедурой. Не забудьте снять украшения, например, цепочку или длинные серьги.
- Очистите лицо от косметики и прочих загрязнений привычным средством для умывания. Просушите кожу лица полотенцем или бумажными салфетками.
  - Нанесите на лицо и шею косметическое масло, сы-воротку для лица или увлажняющий крем, чтобы обеспечить лучшее скольжение. Сухой ролик может растягивать кожу, это приведет к образованию морщин и дряблости кожи.
  - Проводите массаж, двигаясь вдоль массажных линий лица снизу вверх. Обработайте большим роликом крупные области лица (лоб, щеки, линия челюсти) и шею, а малым роликом более мелкие области (зону вокруг глаз, около крыльев носа и вокруг рта).
  - Начинайте массаж с шеи. Проведите большим роликом по передней поверхности шеи снизу вверх от ключицы до подбородка. Затем проведите сверху вниз по боковым поверхностям шеи от линии челюсти до плеча.
  - Далее проработайте область щек. Сначала проведите большим роликом от середины подбородка вдоль линии челюсти к мочке уха. Затем проведите от уголков рта к центру уха. Далее проведите большим роликом от крыльев носа к вискам.
  - Проработайте большим роликом область лба. Проведите им от центра лба к вискам и от переносицы вверх к центру лба.



8. Для проработки мелких зон на лице используйте малый ролик. Проведите им по нижнему веку от внешнего уголка глаза к внутреннему. Затем проведите им по верхнему веку от внутреннего уголка глаза к внешнему.

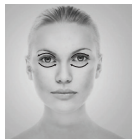

9. Проработайте малым роликом область около крыльев носа, двигаясь от крыльев носа к щекам.



10. Проработайте малым роликом область вокруг рта. Проведите малым роликом от центра губ к периферии, немного выходя за контур рта.



11. После завершения процедуры умойте лицо, нанесите увлажняющее средство.

Для достижения оптимального эффекта используйте массажер регулярно. Рекомендуемая продолжительность одной процедуры 10–15 минут.

**Примечание.** Не рекомендуется передавать прибор для использования другим людям по гигиеническим причинам.

**Внимание!** Не давите слишком сильно на кожу во время массажа. При дискомфорте во время массажа прекратите процедуру и обратитесь к врачу. Не используйте массажер после проведения химического пилинга лица. Возможно временное покраснение кожи после использования прибора. Если краснота не прошла в течение 15–20 минут, обратитесь к врачу.

### Советы

При работе с массажером предварительно наносите на лицо и шею косметическое масло, сыворотку для лица или увлажняющий крем, чтобы обеспечить луч-

шее скольжение. Сухой ролик может растягивать кожу, это приведет к образованию морщин и дряблости кожи.

Вы можете использовать роликовый массажер совместно с тканевыми масками. Для этого предварительно нанесите тканевую маску на лицо, затем проведите процедуру массажа с помощью массажера, как описано в разделе «Использование». Использование массажера поверх тканевой маски позволяет активным веществам из сыворотки, которой пропитана маска, глубже проникнуть в кожу. Это приводит к более заметному эффекту после процедуры.

Применение массажера вечером поможет расслабить мышцы и быстрее восстановить кожу, поскольку активные вещества из крема или сыворотки, которые вы используете для ухода после массажа, проникнут в более глубокие слои кожи.

Для избавления от отечности по утрам вы можете использовать холодный массажер. Для этого предварительно положите его в холодильник, а затем проведите массаж, как описано в разделе «Использование».

Для достижения заметных результатов рекомендуется использовать роликовый массажер ежедневно утром и вечером. Рекомендуемая продолжительность одной процедуры 10–15 минут.

## **Чистка и обслуживание**

После каждого использования массажера убирайте с поверхности роликов остатки крема или других косметических средств с помощью сухой ткани. Также рекомендуется очищать устройство перед проведением массажа. Для дезинфицирования массажера можно использовать ватный диск, смоченный хлоргексидином или спиртом. Не используйте для чистки жесткие моющие средства и абразивные ткани, не промывайте массажер водой.

## **Уход и хранение**

Перед тем, как убрать роликовый массажер на хранение, очистите массажер, как описано в главе «Чистка и обслуживание». На длительное хранение убирайте массажер в коробку или пакет для защиты от пыли и



грязи. Храните массажер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

## Устранение неполадок

### Неприятные ощущения во время процедуры

Возможная причина	Решение
Вы не нанесли на лицо и шею косметическое масло, сыворотку для лица или увлажняющий крем	До проведения процедуры наносите на лицо и шею косметическое масло, сыворотку для лица или увлажняющий крем

### Покраснение кожи после процедуры

Возможная причина	Решение
Возможно временное покраснение кожи после использования прибора	Если краснота не прошла в течение 15–20 минут, обратитесь к врачу
Вы слишком сильно давите на кожу при проведении массажа	Уменьшите давление на кожу при проведении массажа

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru).

## Технические характеристики

1. Материал роликов массажера: розовый кварц
2. Количество роликов: 2
3. Размер устройства: 61 × 21 × 145 мм
4. Размер упаковки: 80 × 35 × 170 мм
5. Вес нетто: 0,06 кг
6. Вес брутто: 0,21 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Производитель: Шэньчжэнь АЙФАЙН Текнолэдджи



Ко., Лтд. 4 Флор, Хуаньань Индастри Парк, Юнфэн 4 Роуд, Байшия Ист, Фуюн Таун, Баоань Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

### **Условия гарантии**

Механическое повреждение корпуса и частей устройства не является гарантийным случаем.

Ржавчина, появившаяся на металлических частях массажера из-за использования воды при чистке прибора, не является гарантийным случаем.

Повреждение покрытия массажера вследствие использования агрессивных химических средств для очистки не является гарантийным случаем.

## **Меры предосторожности**

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться массажером только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
4. Не допускайте падения массажера и не подвергайте его ударам.
5. Храните устройство в недоступных детям местах.
6. Не промывайте массажер водой. Не используйте для чистки жесткие моющие средства и абразивные ткани.
7. Массажер не является медицинским прибором и должен использоваться только в профилактических и косметологических целях.
8. При наличии хронических или острых заболеваний перед использованием прибором необходимо проконсультироваться с врачом.
9. При дискомфорте во время массажа лица прекратите процедуру и обратитесь к врачу.
10. Не используйте массажер после проведения химического пилинга лица.
11. Возможно временное покраснение кожи после использования прибора. Если краснота не прошла в течение 15–20 минут, обратитесь к врачу.

IM-2



Kitfort

## Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

8-800-775-56-87